


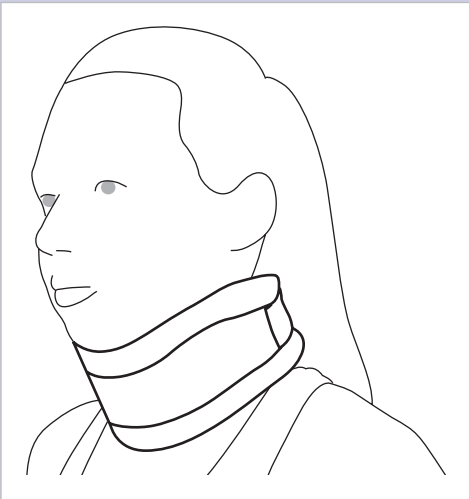

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Ideal for supporting the cervical spine in neutral position, to be used for cervical sprains and strains, post-injury rehabilitation after wearing rigid collar use.

CONTRAINDICATIONS

- None

WARNING & PRECAUTIONS

If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.

APPLICATION INSTRUCTIONS

- 1) Undo the contact closure strap to open the collar.
- 2) Place the collar around the neck, with the contoured part under the chin.
- 3) Close the collar using the contact closure strap.
- 4) Adjust the collar's tightness according to needs and comfort.

CARE

Hand-wash in cold water with mild soap and airdry. Do not bleach. Do not dry-clean or machine-dry. Do not iron.

COMPOSITION

100% cotton



INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Idéal pour maintenir le rachis cervical en position neutre, pour le traitement de lésions ou d'entorses cervicales, pour les phases de réadaptation posttraumatique après le port d'un collier cervical rigide.

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Défaire la patte de fermeture auto-agrippante pour ouvrir le collier.
- 2) Placer le collier autour du cou, en plaçant la partie incurvée sous le menton.
- 3) Fermer le collier en utilisant la patte de fermeture auto-agrippante.
- 4) Ajuster le serrage du collier en fonction du besoin et du confort souhaités.

ENTRETIEN

Laver à la main, à l'eau froide. Utiliser un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas nettoyer à sec, ni sécher au sèche-linge. Ne pas repasser.

COMPOSITION

100% coton



RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS: BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

APLICACIONES / INDICACIONES

- Ideal para soportar la columna cervical en posición neutra, que se utiliza para los casos de esguinces y distensiones cervicales, rehabilitación de lesiones después de haber llevado un collarín rígido.

CONTRAINDICACIONES

- Ninguna

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1) Desate la cinta auto-adhesiva para abrir el collarín.
- 2) Coloque el collarín alrededor del cuello, con la parte contorneada debajo de la barbilla.
- 3) Cierre el collarín usando la cinta auto-adhesiva.
- 4) Ajuste la tensión del collarín según sus necesidades y comodidad.

CUIDADO

Lávalo a mano con agua fría y jabón suave y séquelo con aire. No utilice lejía. No realice lavado en seco ni lo seque en una secadora. No lo planche.

COMPOSICIÓN

100% algodón



PREVISTO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

GARANTÍA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

VERWENDUNGSZWECK / HINWEISE

- Ideal zur Stützung der Halswirbelsäule in neutraler Position bei Zerrungen und Verstauchungen, posttraumatischer Rehabilitation nach dem Tragen einer steifen Halskrause.

KONTRAINDIKATIONEN

- Keine

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- 1) Zum Öffnen der Halskrause das Verschlussband lösen.
- 2) Die Halskrause mit der Aussparung unter dem Kinn um den Hals legen.
- 3) Halskrause mit dem Verschlussband befestigen.
- 4) Halskrause je nach Bedarf und Komfort festziehen oder lockern

PFLEGE

Handwäsche in kaltem Wasser mit mildem Waschmittel und an der Luft trocknen lassen. Kein Bleichmittel verwenden. Nicht chemisch reinigen oder maschinell trocknen. Nicht bügeln.

VERWENDETE MATERIALIEN

100% Baumwolle



FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINEN EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT

GARANTIE DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehöerteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

USO PREVISTO/INDICAZIONI

- Ideale per sostenere la spina cervicale in posizione neutrale, da utilizzare in caso di distorsioni e sforzi cervicali, riabilitazioni post lesione e dopo aver indossato un collare cervicale rigido.

CONTROINDICAZIONI

- Nessuna

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Qualora nel corso dell'utilizzo di questo prodotto si avvertano dolore, gonfiori, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

- 1) Per aprire il collare staccare la cinghia di chiusura a contatto.
- 2) Collocare il collare intorno al collo, con la parte sagomata sotto il mento.
- 3) Chiudere il collare mediante la cinghia di chiusura a contatto.
- 4) Regolare l'aderenza del collare secondo la necessità e il comfort.

MANTENIMENTO

Lavare a mano in acqua fredda con sapone neutro e lasciare asciugare all'aria. Non candeggiare. Non pulire a secco né lavare a macchina. Non stirare.

COMPOSIZIONE

100% cotone



DESTINATO ALL'USO SU PAZIENTE SINGOLO

GARANZIA DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. UIJST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES

- Ideaal voor het ondersteunen van de cervicale wervelkolom in neutrale positie, voor gebruik bij cervicale verstuikingen en -overbelasting, revalidatie voor letsels na het dragen van een stijve kraag.

CONTRA-INDICATIES

- Geen

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMAATREGELEN

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

- 1) Maak de sluitband los om de kraag te openen.
- 2) Plaats de kraag rond de nek, met het omtrokken deel onder de kin.
- 3) Sluit de kraag met de sluitband.
- 4) Pas de aansluiting van de kraag aan naar behoefte en comfort.

ONDERHOUD

Op de hand wassen in koud water met milde zeep en aan de lucht laten drogen. Niet bleken. Niet stomen of in een wasdroger drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING

100% katoen



BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN PATIËNT

GARANTIE DJO, LLC zal gedurende een periode van zes maanden na de verkoopdatum het product en de bijbehorende accessoires geheel of gedeeltelijk repareren of vervangen als materiaal- of fabricagefouten geconstateerd worden.

LET OP: HOEWEL ALLES IN HET WERK IS GESTELD MET BEHOELP VAN DE ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN OM OPTIMALE COMPATIBILITEIT QUA WERKING, STERKTE, DUURZAAMHEID EN COMFORT TE VERKRIJGEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT LETSEL ZAL WORDEN VOORKOMEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE

- Ideální k podepření krční páteře v neutrální poloze. Využívá se u ústřelů či namožení krční páteře a v poúrazové rehabilitaci po aplikaci rigidní ortézy.

KONTRAINDIKACE

- Žádné

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ak při používání tohoto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

POKYNY K POUŽITÍ

- 1) Uvolněním pásky suchého zipu límeček otevřete.
- 2) Límeček umístěte kolem krku – tvarovanou částí pod bradu.
- 3) Použítím pásky suchého zipu límeček uzavřete.
- 4) Podle potřeby a k zajištění pohodlí upravte těsnost límce.

ÚDRŽBA

Výrobek perte ručně toaletním mýdlem ve studené vodě a sušte jej na vzduchu. Nepoužívejte bělidla. Nečistěte chemicky a nesušte v sušičce. Nežehlište.

SLOŽENÍ

Bavlna: 100 %



URČENO K POUŽITÍ U JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNEJŠÍCH TECHNIK VĚNOVANO MAXIMÁLNI ÚSILÍ PRO ZÍSKÁNÍ MAXIMÁLNI KOMPATIBILITY FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLI, NĚLZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU BUDĚ ÚČINNOU PREVENCIU VOČÍ PORANENÍU.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NÚTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNGOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

- Ideálny na oporu krčnej chrbtice v neutrálnej polohe, na použitie na krčné vyvrtnutia a preslenia, poúrazovú rehabilitáciu po používaní tuhého goliera.

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

- 1) Odopnite kontaktný upínací popruh a otvorte golier.
- 2) Umiestnite golier okolo krku s tvarovanou časťou pod bradu.
- 3) Upevnite golier pomocou kontaktného upínacieho popruhu.
- 4) Upravte tesnosť goliera podľa potreby a pohodlia.

ÚDRŽBA

Umyvajte ručne v studenej vode jemným saponátom a nechajte vyschnúť na vzduchu. Nepoužívajte bieliadla. Nečistite chemicky a nesušte v sušičke. Nežehlite.

ZLOŽENIE

100 % bavlna




URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNIK VENOVALO VEŠTKO ÚSILIE ZÍSKANÍU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIU VOČÍ PORANENIU.



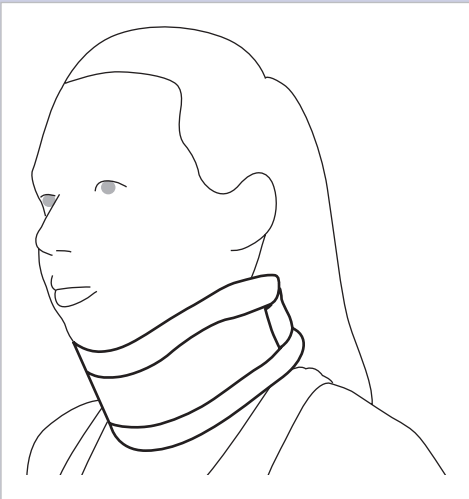

DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGennem FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FØR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILTÆNKT ANVENDELSE/INDIKATIONER

- Ideel til støtte af nakken, til støtte af nakken i neutral position, til brug ved forstrækninger af nakken, efter genoptræning efter skade og efter at have anvendt en stiv halskrave.

KONTRAINDIKATIONER

- Ingen

ADVARSEL OG FORHOLDSREGLER

Hvis det opstår smerter, hævelser, sansemæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.

VEJLEDNING I PÅSÆTNING

- 1) Løs kontaktlukkeremmen for at åbne kraven.
- 2) Placer kraven rundt om halsen med den formede del under hagen.
- 3) Luk kraven med kontaktlukkeremmen.
- 4) Tilpas kravens stramning efter behov og komfort.

VEDLIGEHOLDELSE

Håndvask i koldt vand med mild sæbe og lufttør. Anvend ikke blegemidler. Må ikke renses eller maskintørres. Må ikke stryges.

SAMMENSETNING

100 % bomuld

 **LATEXFRI**

TILTÆNKT BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT

GARANTI Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC helt eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse.

ERKLÆRING: SELV OM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FØRENEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMLIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

- Idealisk för stöd av halsryggen i neutral position vid halsvrickningar och sträckningar, rehabilitering efter skada efter användning av styv krage.

KONTRAINDIKATIONER

- Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontakta omedelbart läkare om smärta, svullnad, ändrade förmimmelser eller andra ovanliga reaktioner uppstår medan produkten används.

ANVISNINGAR FÖR APPLICERING

- 1) Öppna kontaktstängningsremmen för att öppna kragen.
- 2) Placera kragen runt nacken med den konturerade delen under kinden hakan.
- 3) Stäng kragen med kontaktstängningsremmen.
- 4) Justera kragens åtdragning i enlighet med behov och komfort.

SKÖTSEL

Håndtvätta i kallt vatten med mild rengöringsmedel og lufttorka. Blek inte. Kem- eller maskintvätta inte. Stryk inte.

SAMMANSÄTTNING

100 % bomull

 **INNEHÅLLER INTE LATEX**

AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN ENDA PATIENT

GARANTI DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material og utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OBS! ALLA ANSTRÄNGNINGAR HAR GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHET OCH KOMFORT. MEN INGA GARANTIER LÄMMAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER

- Ideell for støtte av halsryggen i nøytral posisjon, for bruk for halsforstrekkeelse og forstuvninger, postskade rehabilitering etter bruk av stiv krage.

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Hvis det oppstår smerte, hevelse, endringer i følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, må du ta kontakt med legen straks.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- 1) Løsne lukkestroppen for å åpne kragen.
- 2) Plasser kragen rundt halsen, med kurvete delen under haken.
- 3) Lukk kragen ved bruk av lukkestroppen.
- 4) Juster kragens stramhet i henhold til behov og komfort.

STELL

Håndvask i kaldt vann med mild såpe og lufttørk. Ikke bleke. Ikke rens eller tørk i maskin. Ikke stryk.

SAMMENSETNING

100% puuvillaa

 **LATEX FREE**

BARE MENT FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM KAN GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPNÅ MAKSIMAL FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, ER DET INGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT

- Ihanteellinen kaularangan tukemiseen neutraaliin asentoon, käytetään niskaa venähdyksiin ja revähdyksiin, sekä kuntoutuksessa jäykän niskatuen käytön jälkeen.

KONTRAINDIKAATIOT

- Ei tunnetta

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Jos koet tuotteen käytön aikana kipua, turvotusta, tuntoaistimusten muutoksia tai epätavallisia reaktioita, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

PUKEMISOHJEET

- 1) Irrota sulkuremmi avataksesi niskatuen.
- 2) Aseta niskatuki kaulan ympärille, niin että muotoiltu osa tulee leuan alle.
- 3) Sulje tuki sulkuremmillä.
- 4) Säädä tuen tiukkuus käyttötarpeen ja mukavuuden mukaiseksi.

TUOTTEEN HOITO

Pese käsin viileässä vedessä vähällä saippualla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Ei saa valkaista. Ei saa kuivapestä tai konepestä. Ei saa siiltää.

VALMISTUSMATERIAALIT

100% puuvillaa

 **UTEN LATEKS**

SUOSITELLAAN YHDEN POTILAAN KAYTTOON

TAKUU DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPIA TEKNIKKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRYTTY VARMISTAMAAN, ETTÄ TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OULISVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETTÄ VAHINKO VOITAISIIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

©2015 DJO, LLC

Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41
MDSS GmbH
EC REP

13-6446 REV B

www.DJOglobal.com
T +1.800.525.8785
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street
DJO, LLC



Cervical Collar C1

CERVICAL COLLAR
COLLIER CERVICAL
COLLARÍN CERVICAL
COLLARE CERVICALE
ZERVİKALSTUTZE
HALSKRAAG
HALSKRAVE
NACK KRAG
NAKKE KRAG
KAULATUKI
KRČNÍ LÍMEC
KRČNÝ GOLIER

