



## Fiche Technique : Cartouche Ophtalmique MDJ Cart + & Tip

**REF : 00265 Mini B & Tip**

### ➤ **Généralités**


MDJ SAS est une société française dont le siège social se trouve :

ZI Racine Palladuc  
63650 La Monnerie Le Montel  
France

MDJ est, au titre de la directive européenne 93/42 amendée par la directive 2007/47/CE, fabricant de dispositifs médicaux. MDJ assure le développement, la conception et la vente de dispositifs médicaux et plus spécifiquement de systèmes d'injection pour lentilles intraoculaires : cartouches et injecteurs.

### ➤ **Cartouche Ophtalmique MDJ Cart + ref : 00265 Mini B & Tip :**

#### ▪ **Blister Interne**

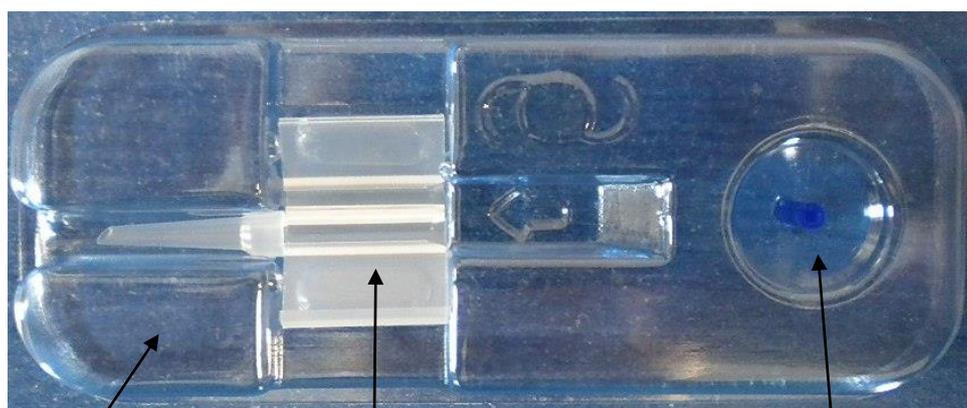

Blister Interne  
(ou chevalet)

Cartouche MDJ :  
00265 MINI B

Manchon Silicone  
m4052



Le blister interne (ou chevalet) contient et maintient une cartouche MDJ Cart +de référence 00265 Mini B et un manchon en silicone de référence m4052.

▪ **Composition :**

- Cartouche : Matériel polypropylène – Biocompatible –Cartouche Ophtalmique MDJ CART + de référence 00265 Mini B

- Manchon Silicone:

- Manchon en silicone – Matériel Biocompatible Classe USP VI
- Caractéristiques de dureté - 3 duretés possibles :  
50 shores ref: m4052
- Dimensions : L: 9.00 mm – External Diameter: 2.45 mm






➤ **Packaging: Cartouche Ophtalmique MDJ Cart +:**

**REF : 00265 Mini B & Tip**

▪ **Blister interne - Chevalet**

- PETG plastique, épaisseur 500 µm, grade medical
- Dimensions: 94\*39\*10.9 mm

*Photo du blister interne - Chevalet*

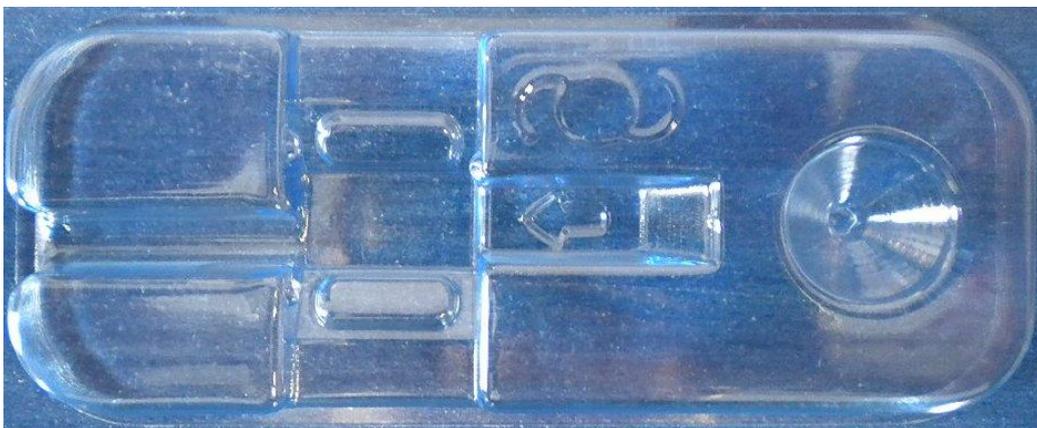


▪ **Blister externe**

- PETG plastique, épaisseur 500 µm, grade medical
- Dimensions: 126\*61\*13 mm

*Photo du blister externe :*



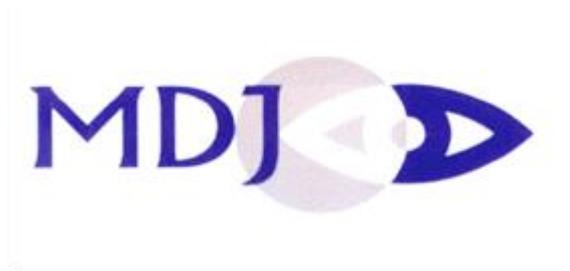

- Opercule: - Papier encollé référence Co 95, de couleur blanche
- Dimensions: 62\*127 mm



Les cartouches ophtalmiques 00265 Mini B & Tip sont emballées individuellement puis regroupées par boîte distributrice par 10.

### ➤ **Precautions**

MDJ garantit le bon fonctionnement de la cartouche et du manchon en silicone à condition qu'il soit utilisé uniquement avec les injecteurs ophtalmiques MDJ.

### ➤ **Sterilisation à l'oxyde d'éthylène**

Un pastille autocollante spéciale pour la stérilisation ETO est ajoutée sur le blister. Après l'exposition au gaz, cette pastille devient vert et la mention « GREEN IS ETO EXPOSED (*vert si exposé à l'ETO*) » apparaît. Voir ci-dessous :



Les cartouches ophtalmiques MDJ Cart + & Tip sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène et ont une péremption de 3 ans (36 mois) maximum.

### ➤ **Condition de stockage**

- Conditionnement à température ambiante