

Fiche technique

Panier Extracteur de Calculs

Extracteur calcul urinaire panier

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	Cf Tableau
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0124
Première mise sur le marché de l'UE :	1999
Fabricant :	Urotech GmbH



Descriptif du dispositif :


Le panier d'extraction sert à capturer et retirer les calculs rénaux par urétéroréoscopie. Paniers d'extraction avec trois, quatre ou six fils, droit ou hélicoïdal en Nitinol avec une poignée amovible.

Longueur : 90 ou 120 cm

Type de panier : standard, sans extrémité, filiforme

Les paniers d'extraction sans embout à panier droit sont fournis avec un adaptateur Tuohy Borst.

Poignée type Lahme pour tous les paniers d'extraction de calculs: Poignée de conception ergonomique avec surface antidérapante déconnectable et reconnectable permettant la fixation du panier de retrait des calculs par mécanisme de ressort.

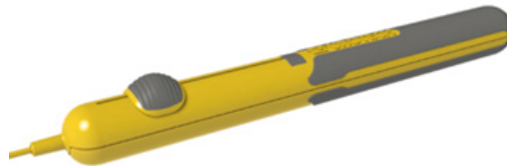

Fiche technique

Références Catalogue :

Référence AI	Référence Fournisseur	Taille (FR/CH)	Nb de Fils	Longueur de travail (cm)	Longueur du panier (cm)	Diamètre du panier (mm)	Forme du panier
Sans embout (Cladimed : G55AA01)							
221969	STN-T123-120	1,2	3	120	12	8	droit
221970	STN-T184-120	1,8	4	120	15	11	droit
221971	STN-HT184-120	1,8	4	120	15	11	hélicoïdal
221972	STN-T186-120	1,8	6	120	13	9	droit
221973	STN-T224-120	2,2	4	120	18	11	droit
							Longueur de l'embout (mm)
Hélicoïdal (Cladimed G55AA99)							
221974	STN-L254-090	2,5	4	90	30	12	3
221975	STN-L254-120	2,5	4	120	30	12	3
221976	STN-L304-090	3	4	90	31	12	3
221977	STN-L304-120	3	4	120	31	12	3
221978	STN-L404-090	4	4	90	37	15	3
Filiforme (Cladimed : G55AA02)							
221979	STN-F304-090	3	4	90	30	12	40
Droit (Cladimed : G55AA99)							
221980	STN-G254-120	2,5	4	120	30	12	3
221981	STN-G304-120	3	4	120	31	12	3

Conditionnement : par 3 unités

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Panier

Elément : Tube

Elément : Gaine

Matériau : Nitinol

Matériau : Acier inoxydable de grade médical

Matériau : pour panier sans embout : Polyimide

Pour panier avec embout : polyétheréthercétone PEEK

Elément : Poussoir

Elément : Poignée

Elément : Adaptateur Tuohy Borst

Matériau : Polyoxyméthylène

Matériau : Polyoxyméthylène, Polypropylène, ABS

Matériau : PC, PTFE, Silicone (valve)

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Date : 11/2016

Version : 4.00 - FT – Panier extracteur

SCANNEZ
 POUR ACCÉDER AU
 CONTENU EN LIGNE



Fiche technique

Urologie
Endoscopie

Indications :

Urologie
Extraction calculs

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Vérifier l'intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

