

injeTAK®

AIGUILLE D'INJECTION SOUS CYSTOSCOPIE
PRÉCISION DU POSITIONNEMENT



Innovation en Pelvi-Périnéologie

PRÉCISION, SÉCURITÉ ET VITESSE

Grâce à son MARQUAGE DE PROFONDEUR BREVETÉ

injeTAK®

TRAITEMENT ET SÉCURITÉ DU PATIENT INÉGALÉS

- Destinée aux injections sous cystoscopie dans la paroi vésicale lors de l'hyperactivité vésicale (HV) et de l'hyperactivité détrusorienne neurogène (HDN)
- Distribution précise et sûre du médicament, sur un temps de procédure réduit

RÉGLAGE OPTIMISÉ

- L'aiguille rétractable protégé l'extrémité de l'aiguille et le cystoscope
- Elimine le recours à un introducteur
- L'extrémité de l'aiguille peut être réglée à 0, 2, 3, 4 et 5 mm afin de s'adapter à l'épaisseur de la paroi vésicale
- Les réglages permettent d'obtenir une longueur d'aiguille optimale répondant au critères de vitesse, sécurité et reproductibilité
- Conçue dans un souci d'ergonomie, elle permet des réglages simples de l'extrémité



CARACTÉRISTIQUES DE L'AIGUILLE

- Grâce à sa taille de 4,8 Fr, elle peut être utilisée dans des canaux opérateurs plus petits et dans la plupart des endoscopes pédiatriques
- Le marqueur noir sur son extrémité indique la proximité visuelle des tissus, permettant ainsi un positionnement précis, une ponction sûre et une profondeur calibrée
- La précision de son angle ainsi que de son extrémité à trois biseaux ont été conçues afin de réduire la force nécessaire à la ponction
- Le dessin unique de la canule permet une injection simple et une flexibilité supérieure tout en conservant son intégrité structurelle

CHOIX DE TAILLES DISPONIBLES

35 cm – DIS199

70 cm – DIS201

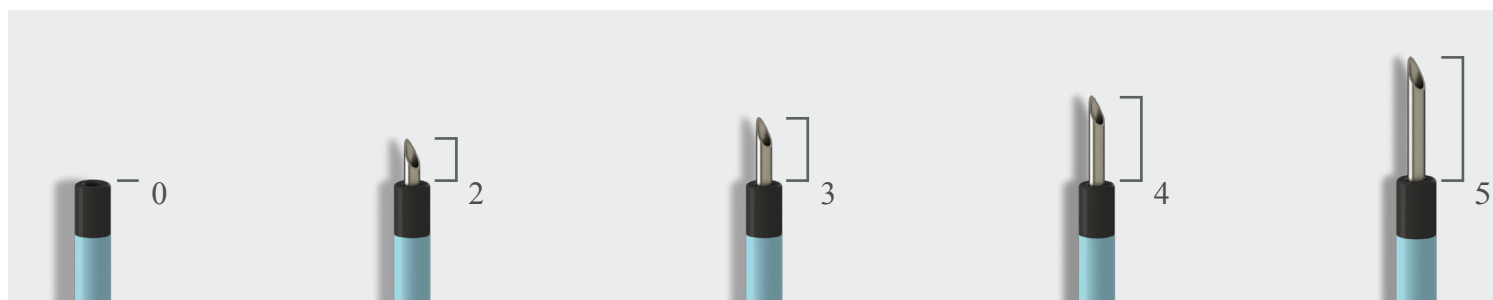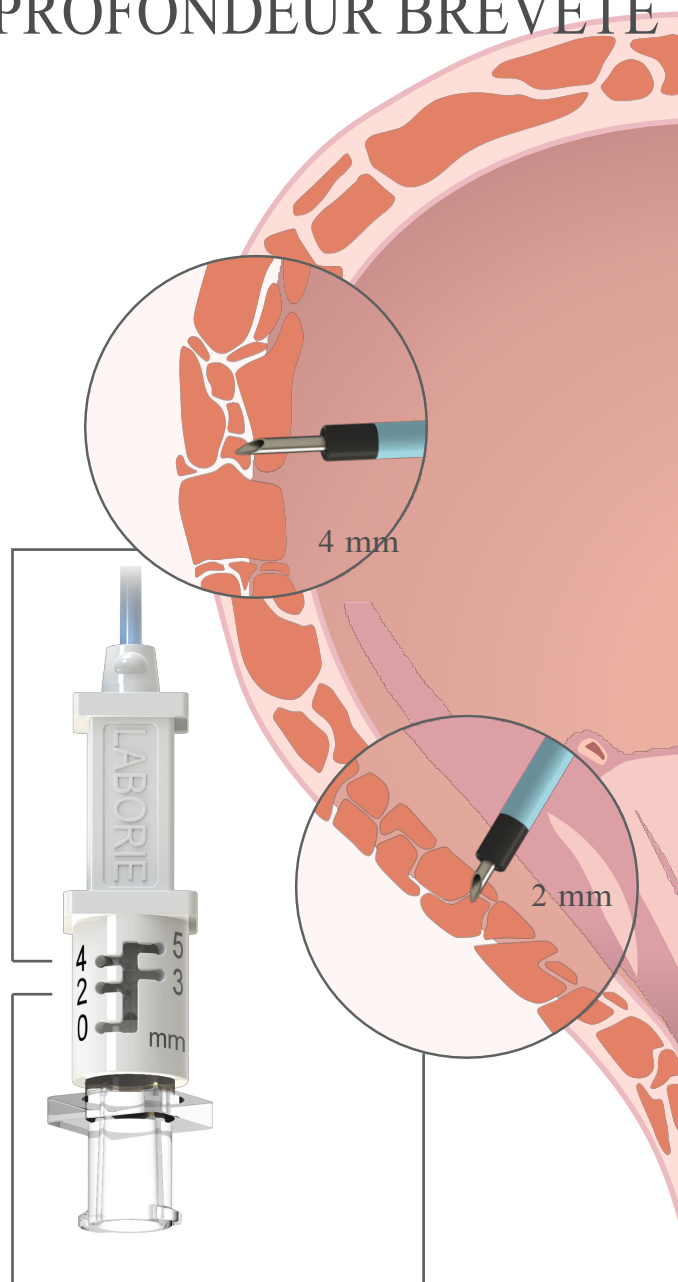

USA:
Tel.: +1 802 857 1300
800 522 6743
Fax: +1 802 878 1122
Email: usmarketing@laborie.com

EUROPE:
Tel.: +44 1788 547888
Fax: +44 1788 571652
Email: euromarketing@laborie.com

CANADA/INTERNATIONAL:
Tel.: +1 905 612 1170
Fax: +1 905 612 9731
Email: intlmarketing@laborie.com

FRANCE:
Tel.: +33 (0) 43 41 34 22
Fax: +33 (0) 43 41 38 69
Email: advfrance@laborie.com

