

Visu-Loc®

APPLICATEUR DE CLIPS MULTIPLE
À RESSORT



Testez la différence entre un clip à
écrasement et un **clip à ressort**.




MICROLINE
SURGICAL

The Reposables Company

Visu-Loc®

APPLICATEUR DE CLIPS MULTIPLE À RESSORT

L'applicateur de clips Visu-Loc délivre un clip à ressort par un diamètre 5 mm, pour conserver une pression constante tout au long de la nécrose des vaisseaux. À la différence des applicateurs de clips à écrasement, les mors de l'applicateur Visu-Loc peuvent être utilisés pour saisir les tissus sans déployer un clip.

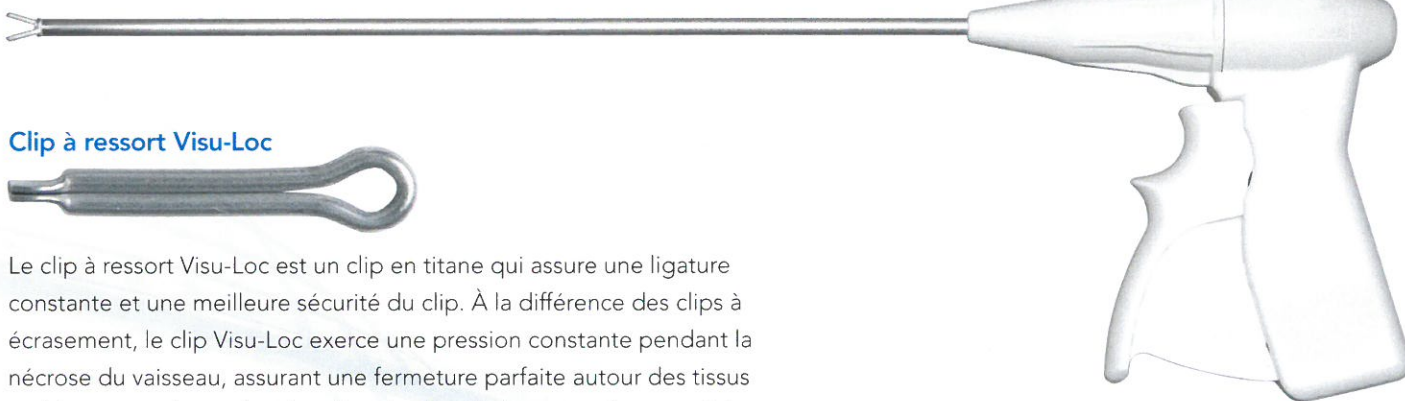


Clip à ressort Visu-Loc

Le clip à ressort Visu-Loc est un clip en titane qui assure une ligature constante et une meilleure sécurité du clip. À la différence des clips à écrasement, le clip Visu-Loc exerce une pression constante pendant la nécrose du vaisseau, assurant une fermeture parfaite autour des tissus et évitant tout risque de migration du clip. Sa longueur étant supérieure de 13 % par rapport aux clips medium/large standard, notre clip à ressort Visu-Loc facilite la ligature des vaisseaux plus larges.

MICROLINE
SURGICAL

MICROLINE
SURGICAL


MICROLINE
SURGICAL

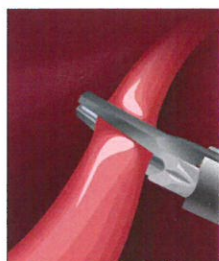

Application d'un clip à écrasement.




Application d'un clip à ressort Visu-Loc.

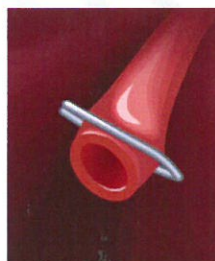


Vaisseau ligaturé avec un clip à écrasement.



Vaisseau ligaturé avec un clip à ressort Visu-Loc.

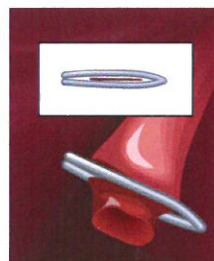

Après la nécrose, le clip à écrasement devient lâche autour du vaisseau.

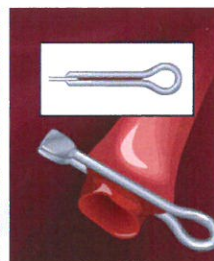

Après la nécrose, le clip à ressort Visu-Loc est en contact complet avec le vaisseau.

INFORMATIONS DE COMMANDE :

Applicateur de clips multiple à ressort Visu-Loc

Longueur de 32,4 cm
20 clips medium/large
Usage unique

RÉF 2001

MICROLINE
SURGICAL

50 Dunham Road | Suite 1500 | Beverly, MA 01915 États-Unis
Téléphone 978-922-9810 | Fax 978-922-9209 | www.microlinesurgical.com

Miline France SAS | 23 Rue du Roule | Paris, France 75001
Téléphone +33 (0) 1 82 88 38 84 | Fax +33 (0) 1 82 88 38 85 | www.microlinesurgical.com

© 2016 Microline Surgical. Microline est une marque de commerce et/ou déposée de Microline Surgical.
Visu-Loc est une marque de commerce et/ou déposée de Microline Surgical.
Visu-Loc est un dispositif de classification UE : IIb.
N° de réf. : 09-39-00243-00-INT Rév. A, 6/16

Important : Avant l'utilisation, se reporter au mode d'emploi fourni avec ce dispositif qui contient les informations complètes du produit, notamment les indications, contre-indications, événements indésirables, procédures suggérées, avertissements et précautions.

CE
0120 SGS