

ASAP[®]

ASAPLP[™]

Kits et cathéters d'aspiration

ASPIRATION PUISSANTE DES CAILLOTS



Aspiration puissante des caillots

Les kits et cathéters d'aspiration ASAP® et ASAPLP™ sont conçus pour l'élimination efficace des thrombus mous et récents chez les patients ayant subi une ICP et présentant de gros thrombus résiduels. Élaborés pour faciliter les procédures, les kits et cathéters d'aspiration ASAP et ASAPLP sont les produits de qualité dont vous avez besoin pour assurer une aspiration puissante des caillots, permettant ainsi de rétablir et d'améliorer la circulation sanguine dans les vaisseaux thrombosés.¹

Cathéter d'aspiration ASAP

Surface de la lumière d'aspiration	1,01 mm ²
Taille de guide max.	0,014"/0,36 mm
Longueur du cathéter	140 cm
Dia. ext. cathéter	0,068"/1,73 mm
Compatible avec un cathéter-guide	≥0,070"/1,78 mm, 6 F



Navigation optimale
Revêtement hydrophile pour une transmission vasculaire aisée.

Suivi de guide excellent
Cathéter à échange rapide conçu pour gagner du temps.

Aspiration rapide
Vaste lumière d'aspiration permettant une évacuation rapide des thrombus.

Cathéter d'aspiration ASAPLP



Surface de la lumière d'aspiration	0,81 mm ²
Taille de guide max.	0,014"/0,36 mm
Longueur du cathéter	145 cm
Dia. ext. cathéter	0,055"/1,40 mm
Compatible avec un cathéter-guide	≥0,66"/1,68 mm, 6 F



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DU PRODUIT ET AVANTAGES


- **Visualisation angiographique améliorée** Les marqueurs de profondeur et l'embout radio-opaque facilitent le traitement des vaisseaux cibles.
- **Transitions en douceur** L'embout à pointe effilée permet de franchir les obstructions.

Grâce au tressage 100 % en acier inoxydable, les cathéters d'aspiration ASAP et ASAPLP sont à même de briser les caillots sans pincement, permettant ainsi une meilleure circulation sanguine (TIMI ≥2).¹

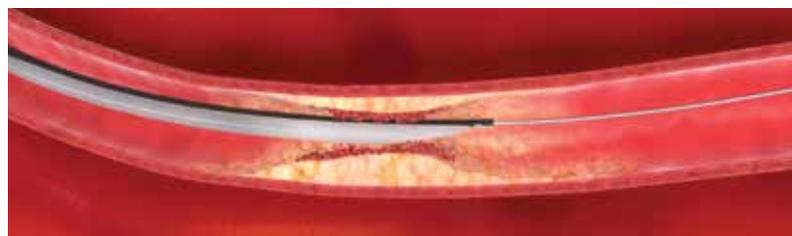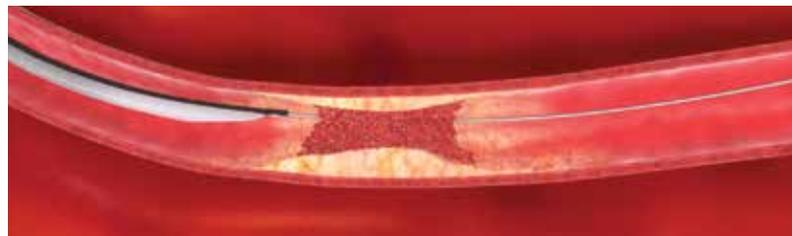


DES RÉSULTATS PROUVÉS DANS UN KIT PRATIQUE

Éliminez les caillots en toute sécurité, rapidement et efficacement grâce aux cathéters d'aspiration ASAP et ASAPLP.

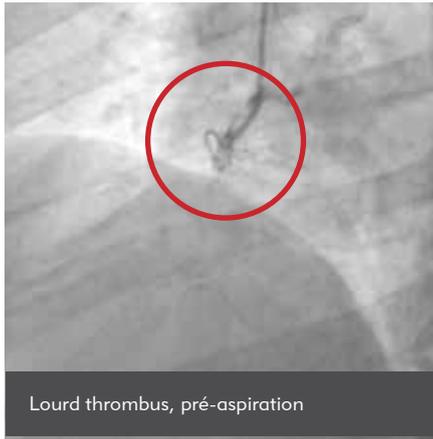

Light thrombus, pré-aspiration

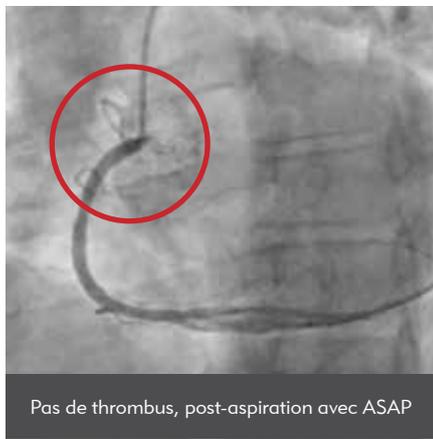

Pas de thrombus, post-aspiration avec ASAP



Kit et cathéter d'aspiration **ASAP**

- 1– Cathéter d'aspiration ASAP
- 1– Tubulure d'extension avec robinet à une voie, longueur totale de 21,5 cm
- 1– Seringue de rinçage RXP®, 4 ml
- 1– Cupule MicroStop avec couvercle pour la collecte des fluides
- 2– Paniers-filtres à pores, 70 microns
- 2– Seringues à dépression VacLok®, 30 ml



Kit et cathéter d'aspiration **ASAPLP**

- 1– Cathéter d'aspiration ASAPLP
- 1– Stilet de raidissement, préchargé dans la lumière d'aspiration du cathéter
- 1– Tubulure d'extension avec robinet à une voie, longueur totale de 21,5 cm
- 1– Seringue de rinçage RXP®, 4 ml
- 1– Cupule MicroStop avec couvercle pour la collecte des fluides
- 2– Paniers-filtres à pores, 70 microns
- 2– Seringues à dépression VacLok®, 30 ml

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence catalogue	Description du produit	Unités par boîte
ASAP100	Kit et cathéter d'aspiration ASAP	1
ASAPLP	Kit et cathéter d'aspiration ASAPLP	1

ASSOCIEZ PLUSIEURS PRODUITS MERIT. CRÉEZ DE NOUVELLES SOLUTIONS PROCÉDURALES.

Choisissez parmi une vaste sélection de produits Merit compatibles avec les kits et cathéters d'aspiration ASAP et ASAPLP. Vous pouvez ainsi créer les solutions de procédure complètes dont vous avez besoin pour améliorer les résultats pour les patients.

GUIDES ET ACCESSOIRES



Guides hydrophiles
Merit Laureate®



Guides orientables
Tenor®
0,014" (165 cm)



Guides de diagnostic
InQwire®

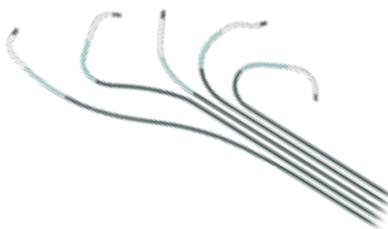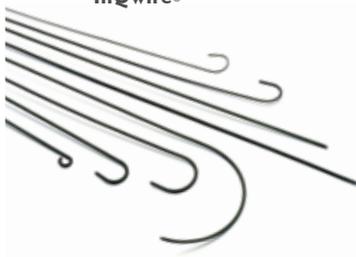

CATHÉTERS D'ANGIOGRAPHIE

Cathéters de diagnostic cardiaque
Performa®



CATHÉTERS-GUIDES

Cathéters-guides
ConcierGE®

ACCÈS

Introducteur hydrophile
Prelude IDEAL™



ASAP® / ASAPLP™

Cathéters d'aspiration
DDM 93/42/CEE Classe III
CE 2797 (BSI NL)
Fabriqués par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

Merit Laureate®

Fil-guide hydrophile
DDM 93/42/CEE Classe IIa
CE 2797 (BSI NL)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

Merit Tenor®

Fil-guide orientable
DDM 93/42/CEE Classe IIa
CE 2797 (BSI NL)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

ConcierGE®

Cathéter – guide
DDM 93/42/CEE Classe III
CE 2797 (BSI NL)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

Performa®

Cathéters de diagnostic
DDM 93/42/CEE Classe III
CE 2797 (BSI NL)
Fabriqués par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

Prelude IDEAL™

Introducteur
DDM 93/42/CEE Classe IIa
CE 2797 (BSI NL)
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

InQwire®

Fil-guide diagnostique
DDM 93/42/CEE Classe III
CE 2797 (BSI NL))
Fabriqué par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

1. Données répertoriées.

Lire attentivement le manuel d'utilisation pour connaître les instructions, les contre-indications, les avertissements et les mises en garde avant utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
Main: +1.801.253.1600
Customer Service: +1.801.208.4300

Merit Medical Europe, Middle
East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

406684003_001 ID 111021

©2021 Merit Medical Systems, Inc. Tous droits réservés.