

VACUETTE®

Aiguilles MULTIPLES


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	<p>Aiguille : <i>Acier spécifique à usage médical.</i> L'extrémité perce veine est siliconée et possède un triple biseau. L'extrémité perce bouchon est siliconée et est composée d'un triple biseau, dans un manchon en caoutchouc synthétique à usage médical garantie SANS LATEX. L'aiguille présente à son embase un point d'orientation dans le prolongement du biseau.</p>
Dimensions	<p>Longueur : 25 mm / 38 mm Diamètre : 0,70 mm / 0,80 mm / 0,90 mm.</p>
Matériaux	<p>Etiquette : Papier BLANC et encre NOIRE ou VERTE ou JAUNE en fonction du diamètre de l'aiguille. Capuchon : Le capuchon de l'extrémité perce bouchon est en polypropylène gris clair. Le capuchon de l'extrémité perce veine est en polypropylène NOIR ou VERT ou JAUNE en fonction du diamètre de l'aiguille.</p>
Normes	<p>Certifié en accord avec les normes EN ISO 9001 et EN ISO 13485. Marquage CE.</p>
Fabrication	<p>Fabriquées au JAPON.</p>
Stérilisation	<p>Procédé de stérilisation par l'oxyde d'éthylène. Aiguilles stériles : < 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level = niveau d'assurance de stérilité). Apyrogène et non toxique. Ne pas réutiliser - Ne pas stériliser.</p>
Mode d'emploi	<p>Voir la notice d'utilisation présente dans chaque carton ou sur demande.</p>
Conditions de stockage	<p>Température de stockage de +4°C à +36°C. Respecter les nomenclatures indiquées à l'extérieur du carton.</p>
Marquage CE	<p>Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux Classification : Class IIa, en accord avec la directive 93/42/EEC du Conseil du 14 Juin 1993 concernant les dispositifs médicaux, Annex IX, III. Classification, 2.2, rule 6 sans exception d'application.</p>
Conditionnement	<p>Par boîte : quantité de 100 aiguilles. Par carton : quantité de 2 000 aiguilles.</p>

Etiquetage

	Aiguille	Boîte	Carton
Logo fabricant	X	X	X
Logo VACUETTE®	X	X	X
N° Référence	X	X	X
N° Lot		X	X
Date de fabrication		X	X
Condition de stockage		X	X
Marquage CE	X	X	X
Marquage stérilité R	X	X	X
Sigle usage unique	X	X	X
Indicateur de stérilité			X
Information de l'emballage		X	X

Image

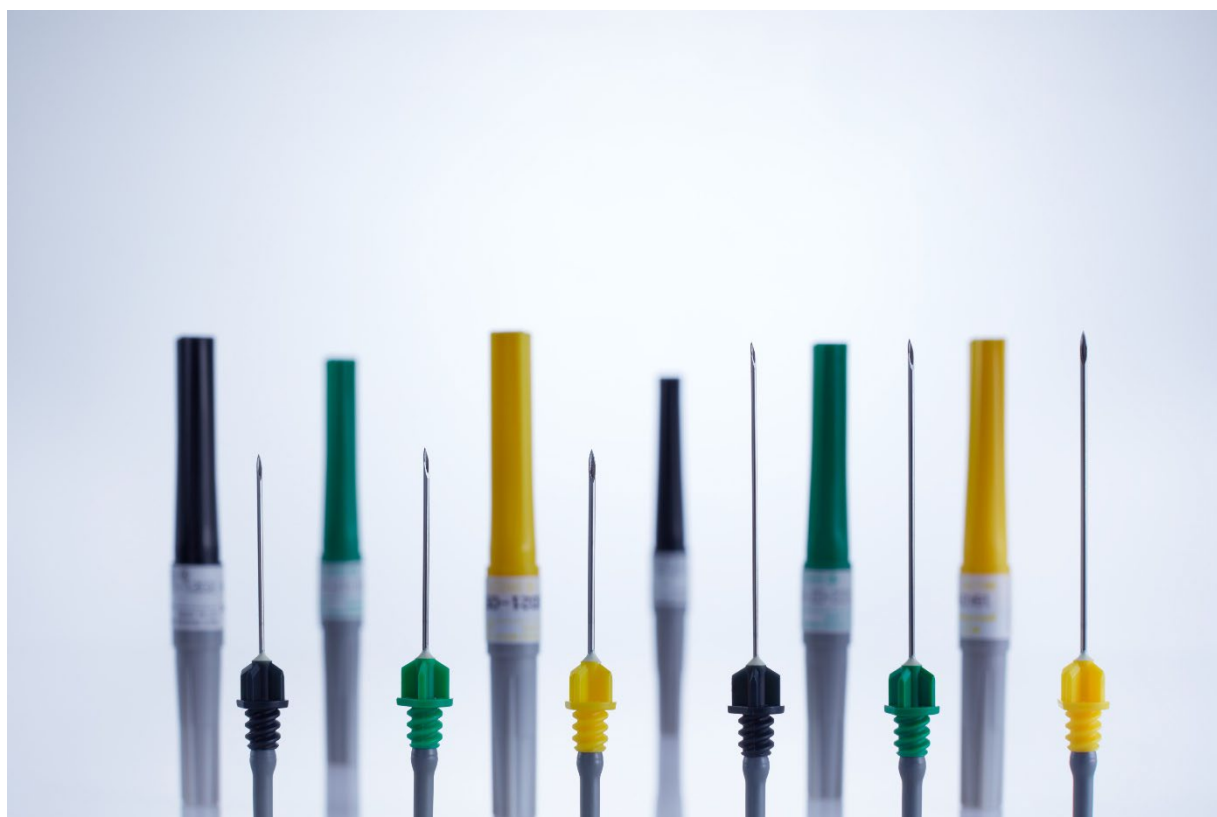

Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.

Aiguilles multiples VACUETTE®

Référence	Description			Conditionnement		Péremption
	Longueur	Gauge	Couleur	Interne	Externe	
450071	25 x 0,7 mm	22G x 1"	Noire	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450072	25 x 0,8 mm	21G x 1"	Verte	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450073	25 x 0,9 mm	20G x 1"	Jaune	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450075	38 x 0,7 mm	22G x 1½"	Noire	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450076	38 x 0,8 mm	21G x 1½"	Verte	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450077	38 x 0,9 mm	20G x 1½"	Jaune	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication
450070	Adaptateur luer	20G x 1"	Bleu roi	100 unités	2 000 unités	36 mois après fabrication