



**HOMOGÉNÉITÉ.
SIMPLICITÉ.
VARIÉTÉ.**

Fountain[®] ValveTip

Systemes de perfusion

Diffusion homogène • Procédure simplifiée • Options variées


Fountain® ValveTip

Systèmes de perfusion

DIFFUSION HOMOGÈNE EXCLUSIVE

- Technologie brevetée de diffusion graduelle grâce à des orifices perforés au laser
- Facilite à la fois les techniques de perfusion percutanée et de goutte-à-goutte continu
- Compatible avec un fil-guide de 0,89 mm (0,035")

FOUNTAIN VALVETIP

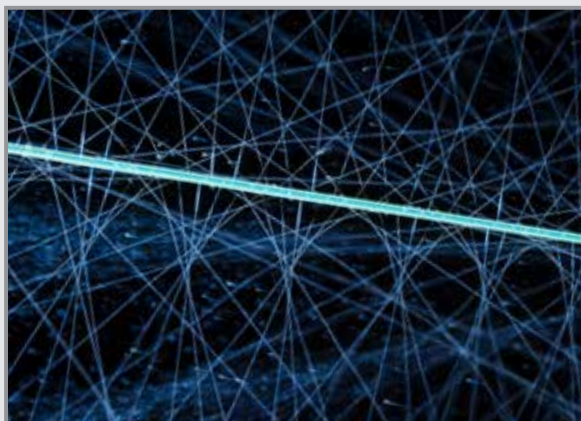

Les orifices latéraux du cathéter de perfusion Fountain pivotent autour du cathéter pour permettre une diffusion plus homogène des agents thérapeutiques.

CONCURRENCE



Les cathéters concurrents ont des fentes ou des orifices latéraux alignés sur quatre rangs parallèles.

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

- ValveTip élimine le besoin d'utiliser un fil d'occlusion
- La technologie ValveTip réduit le temps d'intervention en supprimant les étapes associées à l'utilisation d'un fil d'occlusion
- La conception de pointe de la valve facilite la procédure

VALVE HÉMOSTATIQUE ACCESSPLUS™

Comprise avec chaque cathéter



KIT DE PERFUSION PULSÉE

Comprend une valve de décharge à haute pression, une seringue de perfusion de 1 ml et une seringue à réservoir de 20 ml.

Fountain® ValveTip

Systèmes de perfusion

OPTIONS VARIÉES

- Configurations 4 F et 5 F
- Large choix de cathéters et de longueurs de perfusion
- Gamme étendue pour offrir aux utilisateurs les produits dont ils ont besoin

INFORMATIONS DE COMMANDE

Fountain® ValveTip Systèmes de perfusion*	Cathéter et une valve hémostatique AccessPLUS™**	Taille française	Longueur du cathéter	Segment de perfusion
FIS4-45-10-V	IS4-45-10-V	4 F	45 cm	10 cm
FIS4-45-20-V	IS4-45-20-V	4 F	45 cm	20 cm
FIS4-90-5-V	IS4-90-5-V	4 F	90 cm	5 cm
FIS4-90-10-V	IS4-90-10-V	4 F	90 cm	10 cm
FIS4-90-20-V	IS4-90-20-V	4 F	90 cm	20 cm
FIS4-90-30-V	IS4-90-30-V	4 F	90 cm	30 cm
FIS4-90-40-V	IS4-90-40-V	4 F	90 cm	40 cm
FIS4-90-50-V	IS4-90-50-V	4 F	90 cm	50 cm
FIS4-135-5-V	IS4-135-5-V	4 F	135 cm	5 cm
FIS4-135-10-V	IS4-135-10-V	4 F	135 cm	10 cm
FIS4-135-20-V	IS4-135-20-V	4 F	135 cm	20 cm
FIS4-135-30-V	IS4-135-30-V	4 F	135 cm	30 cm
FIS4-135-40-V	IS4-135-40-V	4 F	135 cm	40 cm
FIS4-135-50-V	IS4-135-50-V	4 F	135 cm	50 cm
FIS5-45-10-V	IS5-45-10-V	5 F	45 cm	10 cm
FIS5-45-20-V	IS5-45-20-V	5 F	45 cm	20 cm
FIS5-90-5-V	IS5-90-5-V	5 F	90 cm	5 cm
FIS5-90-10-V	IS5-90-10-V	5 F	90 cm	10 cm
FIS5-90-20-V	IS5-90-20-V	5 F	90 cm	20 cm
FIS5-90-30-V	IS5-90-30-V	5 F	90 cm	30 cm
FIS5-90-40-V	IS5-90-40-V	5 F	90 cm	40 cm
FIS5-90-50-V	IS5-90-50-V	5 F	90 cm	50 cm
FIS5-135-5-V	IS5-135-5-V	5 F	135 cm	5 cm
FIS5-135-10-V	IS5-135-10-V	5 F	135 cm	10 cm
FIS5-135-20-V	IS5-135-20-V	5 F	135 cm	20 cm
FIS5-135-30-V	IS5-135-30-V	5 F	135 cm	30 cm
FIS5-135-40-V	IS5-135-40-V	5 F	135 cm	40 cm
FIS5-135-50-V	IS5-135-50-V	5 F	135 cm	50 cm

* **Comprend** un cathéter à embout de valve Fountain, une valve hémostatique AccessPLUS, une valve de décharge à haute pression, une seringue de perfusion de 1 ml et une seringue à réservoir de 20 ml.

** **Comprend** un cathéter à embout de valve Fountain et une valve hémostatique AccessPLUS.

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer.

merit.com

Merit Medical France
Centre d'affaires du
Parc des Lumières
46, avenue des Frères Lumière
78190 Trappes, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe,
Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199
AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733