

NAVIGUER SANS FRONTIÈRES

HeartSpan™

Système de délivrance transseptal



AIGUILLE TRANSSEPTALE HEARTSPAN™

L'aiguille transseptale HeartSpan conjugue des angles de courbure courants avec des matériaux avancés et une poignée ergonomique ayant pour but d'améliorer la sensation tactile et le contrôle visuel lors de la ponction transseptale.

POIGNÉE TRANSPARENTE

Permet la visualisation directe des bulles avant qu'elles ne progressent distalement




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Stylet verrouillable

Permet de guider l'aiguille à travers le dilateur afin de réduire le risque de décrochage

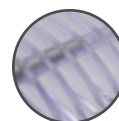


Poignée ergonomique

Offre une excellente qualité de prise en main



Flèche d'orientation

Indique le sens

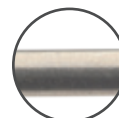

Aiguille à sensibilité élevée

Offre une rigidité accrue



Courbes distales préétablies

Pour plus d'options



Effilée pour une plus grande résistance



Compatible avec la gaine transseptale à courbe fixe ou orientable HeartSpan

Pour une solution complète

AIGUILLES TRANSSEPTALES HEARTSPAN™

Référence	Longueur	Angle de courbure	Calibre d'embout
FND-019-01	71 cm	Courbure 50°	21
FND-019-02	71 cm	Courbure 86°	21
FND-019-03	89 cm	Courbure 50°	21
FND-019-04	89 cm	Courbure 86°	21
FND-019-05	98 cm	Courbure 50°	21
FND-019-06	98 cm	Courbure 86°	21

Conditionné en 1 kit par boîte.

Le contenu du kit comprend : (1) aiguille transseptale et (1) stylet

GAINE TRESSÉE À COURBE FIXE HEARTSPAN™ POUR PONCTION TRANSSEPTALE

La gaine tressée transseptale à courbe fixe HeartSpan est conçue pour une transition dilatateur-gaine en douceur, afin de faciliter l'insertion fémorale et la réduction des traumatismes lors du franchissement du septum auriculaire. La structure tressée de notre gaine fournit une meilleure tenue de courbure et une excellente résistance à la torsion lors d'interventions de longue durée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Dilatateur radio-opaque

Permet la visualisation



Embout souple pour une transition en douceur

Embout distal atraumatique pour une transition en douceur du dilatateur à la gaine et une progression aisée à travers le septum auriculaire

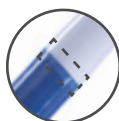

Marqueur en platine intégré

Pour une meilleure visibilité sous fluoroscopie



Orifices des deux côtés

Minimise la cavitation



Gaine tressée radio-opaque

Âme en acier tressé pour une conformabilité contrôlée, faite en Pebax®



Revêtement lubrifiant

Réduit le frottement lors de l'échange des cathéters DP



Robinet à trois voies

Permet le rinçage et l'aspiration



Valve hémostatique intégrée

Conçue pour réduire la pénétration d'air et le reflux



Dilatateur verrouillable

La gaine et le dilatateur se verrouillent pour permettre un profil de franchissement en douceur durant la ponction transseptale


Pebax® est une marque commerciale déposée d'Arkema Group



CINQ NOUVELLES COURBURES DISPONIBLES



12 COURBURES DISPONIBLES POUR PLUS D'OPTIONS

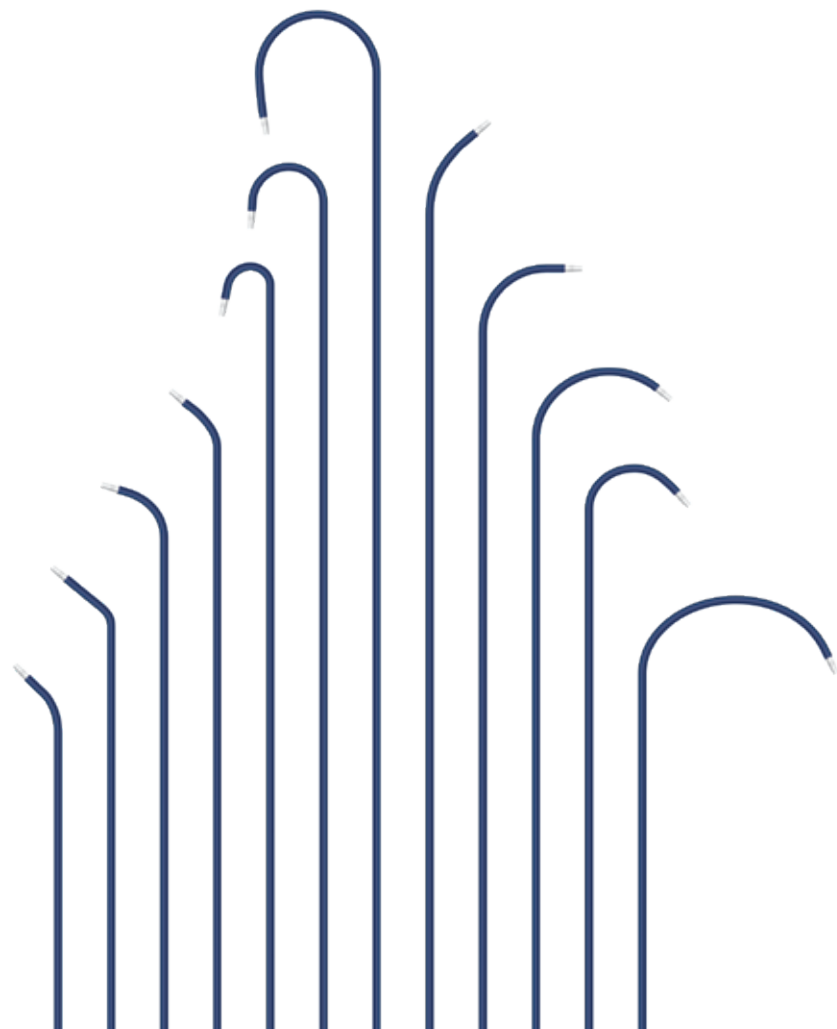

ML0 ML1 ML2 MR0 MP18 MP28 MUL 45° 90° 120° 135° 150°

GAINE TRESSÉE À COURBE FIXE **HEARTSPAN™**

Référence	Taille française	Longueur	Type de courbure	Longueur d'aiguille compatible
FCB8560MP18	8,5 F	60 cm	MP18	71 cm
FCB8560MP28	8,5 F	60 cm	MP28	71 cm
FCB8561MUL	8,5 F	61 cm	MUL	71cm
FCB8563ML0	8,5 F	63 cm	ML0	71 cm
FCB8563ML1	8,5 F	63 cm	ML1	71 cm
FCB8563ML2	8,5 F	63 cm	ML2	71 cm
FCB8563MR0	8,5 F	63 cm	MR0	71 cm
FCB856345	8,5 F	63 cm	45°	71 cm
FCB856390	8,5 F	63 cm	90°	71 cm
FCB8563120	8,5 F	63 cm	120°	71 cm
FCB8563135	8,5 F	63 cm	135°	71 cm
FCB8563150	8,5 F	63 cm	150°	71 cm
FCB8581ML0	8,5 F	81 cm	ML0	89 cm
FCB8581ML1	8,5 F	81 cm	ML1	89 cm
FCB8581ML2	8,5 F	81 cm	ML2	89 cm
FCB8581MR0	8,5 F	81 cm	MR0	89 cm
FCB858145	8,5 F	81 cm	45 °	89 cm
FCB858190	8,5 F	81 cm	90°	89 cm
FCB8581120	8,5 F	81 cm	120°	89 cm
FCB8581135	8,5 F	81 cm	135°	89 cm
FCB8581150	8,5 F	81 cm	150°	89 cm

Conditionné en (1) kit par boîte.
Le contenu du kit comprend : (1) gaine tressée à courbe fixe,
(1) dilateur, et (1) fil-guide de 0,032" x 180 cm.

INTRODUCTEUR À GAINÉ ORIENTABLE HEARTSPAN™

L'introducteur à gainé orientable à 180° dans les deux sens 8,5 F HeartSpan est conçu pour offrir un embout flexible plus souple, afin de réduire le risque de perforation de la paroi auriculaire. L'indicateur de position neutre aide à connaître l'orientation de l'embout distal en un « clic » tactile de la molette. Lors de la navigation dans les cavités cardiaques, la conception de la poignée de la gainé permet un contrôle ergonomique et confortable pour une articulation plus précise de la gainé.

INDICATEUR DE POSITION NEUTRE




Un « clic » tactile indique une position neutre, et la possibilité d'orientation de 0° à 180° permet de réaliser la courbure idéale à l'intérieur de la chambre auriculaire.




ULTRA COMPACT

Transition douce du dilateur à la gainé pour une progression aisée à travers le septum auriculaire.

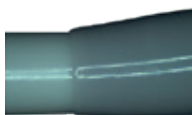

Gaine Merit Heartspan

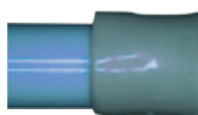

Gaine du principal concurrent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Valve hémostatique

Réduit le reflux sanguin et l'embolie gazeuse



Orifice latéral avec robinet à trois voies

Permet le ringage et l'aspiration

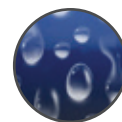


Revêtement lubrifiant

Réduit le frottement lors de l'échange des cathéters DP




Orifices distaux latéraux

Minimise la cavitation

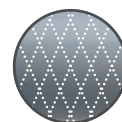

Structure tressée

Assure une bonne tenue de la courbure et offre le soutien nécessaire pour les interventions prolongées.

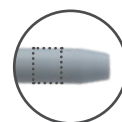

Marqueur radio-opaque

Pour une meilleure visibilité sous fluoroscopie



Embout atraumatique

Pour une progression en douceur à travers le septum auriculaire

INTRODUCTEUR À GAINÉ ORIENTABLE HEARTSPAN™

Référence	Type de courbure	Taille de courbure	Longueur d'aiguille compatible
HST-085-00	Petite	16,4 mm	98 cm
HST-085-10	Taille moyenne	22,4 mm	98 cm
HST-085-20	Grande taille	50,0 mm	98 cm

Conditionné en 1 kit par boîte. Le contenu du kit comprend :

(1) gaine orientable, (1) dilateur et (1) fil-guide de 0,032" x 180 cm.



HeartSpan™

Système de délivrance transseptal

GAMME TRANSSEPTALE COMPLÈTE POUR PLUS D'OPTIONS AVEC D'EXCELLENTE FONCTIONNALITÉS

GAINES TRESSÉE À COURBE FIXE HEARTSPAN™

Référence	Taille française	Longueur	Type de courbure	Longueur d'aiguille compatible
FCB8560MP18	8,5 F	60 cm	MP18	71 cm
FCB8560MP28	8,5 F	60 cm	MP28	71 cm
FCB8561MUL	8,5 F	61 cm	MUL	71 cm
FCB8563ML0	8,5 F	63 cm	ML0	71 cm
FCB8563ML1	8,5 F	63 cm	ML1	71 cm
FCB8563ML2	8,5 F	63 cm	ML2	71 cm
FCB8563MR0	8,5 F	63 cm	MR0	71 cm
FCB856345	8,5 F	63 cm	45°	71 cm
FCB856390	8,5 F	63 cm	90°	71 cm
FCB8563120	8,5 F	63 cm	120°	71 cm
FCB8563135	8,5 F	63 cm	135°	71 cm
FCB8563150	8,5 F	63 cm	150°	71 cm
FCB8581ML0	8,5 F	81 cm	ML0	89 cm
FCB8581ML1	8,5 F	81 cm	ML1	89 cm
FCB8581ML2	8,5 F	81 cm	ML2	89 cm
FCB8581MR0	8,5 F	81 cm	MR0	89 cm
FCB858145	8,5 F	81 cm	45°	89 cm
FCB858190	8,5 F	81 cm	90°	89 cm
FCB8581120	8,5 F	81 cm	120°	89 cm
FCB8581135	8,5 F	81 cm	135°	89 cm
FCB8581150	8,5 F	81 cm	150°	89 cm

Conditionné en (1) kit par boîte.

Le contenu du kit comprend : (1) gaine tressée à courbe fixe, (1) dilateur, et (1) fil-guide de 0,032" x 180 cm.

INTRODUCTEUR À GAINES ORIENTABLE HEARTSPAN™

Référence	Type de courbure	Taille de courbure	Longueur d'aiguille compatible
HST-085-00	Petite	16,4 mm	98 cm
HST-085-10	Taille moyenne	22,4 mm	98 cm
HST-085-20	Grande taille	50,0 mm	98 cm

Conditionné en 1 kit par boîte. **Le contenu du kit comprend :**

(1) gaine orientable, (1) dilateur et (1) fil-guide de 0,032" x 180 cm.

AIGUILLES TRANSSEPTALES HEARTSPAN™

Référence	Longueur	Angle de courbure	Calibre d'embout
FND-019-01	71 cm	Courbure 50°	21
FND-019-02	71 cm	Courbure 86°	21
FND-019-03	89 cm	Courbure 50°	21
FND-019-04	89 cm	Courbure 86°	21
FND-019-05	98 cm	Courbure 50°	21
FND-019-06	98 cm	Courbure 86°	21

Conditionné en 1 kit par boîte.

Le contenu du kit comprend : (1) aiguille transseptale et (1) stylet

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avant d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation



Comprendre. Innover. Distribuer.

merit.com/fr

Merit Medical France
Centre d'affaires du
Parc des Lumières
46, avenue des Frères Lumière
78190 Trappes, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe,
Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199
AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733