

RESTEZ À LA POINTE.

Prelude **ROADSTER**
Guide Sheath



RESTEZ À LA POINTE

Étendez vos procédures diagnostiques et interventionnelles avec le Prelude Roadster, une longue gaine de guidage conçue pour accéder aux anatomies difficiles dans le système vasculaire périphérique. Bénéficiez d'une excellente capacité d'insertion, d'une résistance accrue aux plicatures et à la compression et d'une visibilité élevée sous guidage par imagerie. Quelle que soit votre destination, restez à la pointe grâce au Prelude Roadster.

CONÇUE POUR FACILITER L'INSERTION ET AMÉLIORER LE SUIVI

42 % EN MOINS
DE FORCE D'INSERTION¹




Le revêtement hydrophile distal sur 35 cm de longueur facilite l'entrée dans le vaisseau.

33 % EN PLUS
DE RÉSISTANCE AUX PLICATURES¹



Une couche externe en nylon avec ressort en acier inoxydable et revêtement en PTFE empêche les plicatures.

40 % DE PLUS
DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION¹

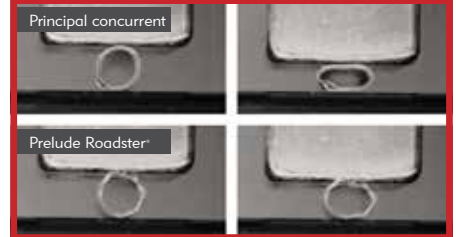

Résiste à plus de compression avec la même force que le principal concurrent.

Visibilité

La bande de marquage et l'extrémité radio-opaque confirment l'emplacement précis, particulièrement important pendant le gonflage critique du ballonnet.

Embase ergonomique

Soutient le couple du dispositif et réduit les plicatures.

Sécurité du patient

Une valve hémostatique permet de réduire le risque de perte de sang du patient.


Suivi

Les transitions continues entre le fil-guide et le dilateur et entre le dilateur et la gaine facilitent le suivi sur le guide pendant la mise en place.

Réducteur de tension

Conçu pour contribuer à limiter les plicatures pendant l'insertion.

Robinet d'arrêt à trois voies

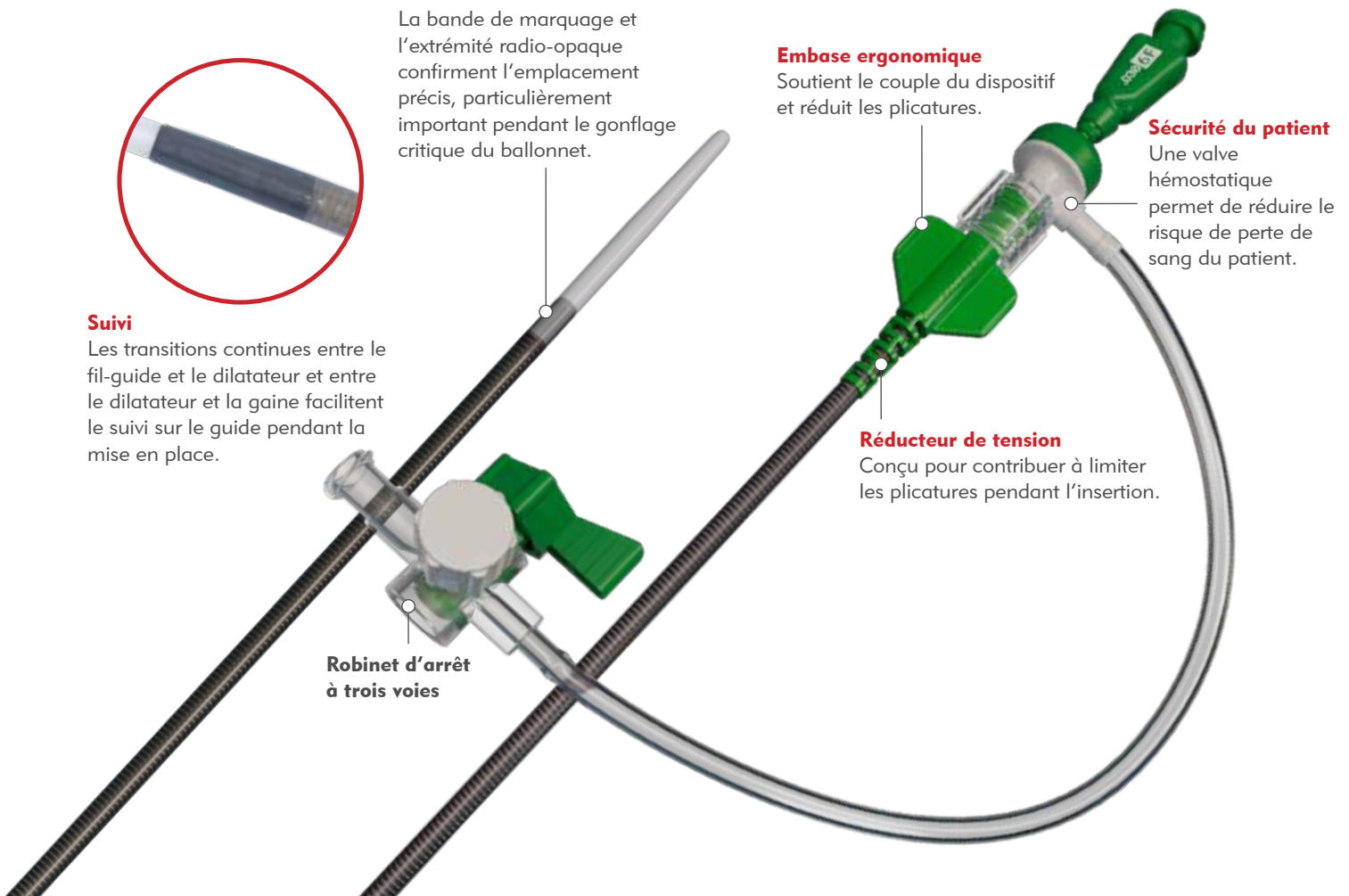

FORMES ET TAILLES RÉPONDANT À UN LARGE ÉVENTAIL DE BESOINS ANATOMIQUES

Chaque patient est différent. Nous proposons plusieurs tailles et formes d'extrémité conçues pour améliorer les résultats des patients et votre expérience interventionnelle.

DIFFÉRENTS DIAMÈTRES

Une large sélection de tailles de lumières conçues pour la pose de dispositifs diagnostiques et thérapeutiques.

4 F




5 F




6 F



7 F

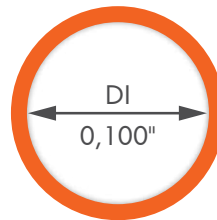


8 F

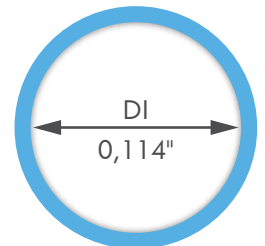

COURBURES

Quatre formes d'extrémité pour vous aider à relever les défis liés à l'intervention.

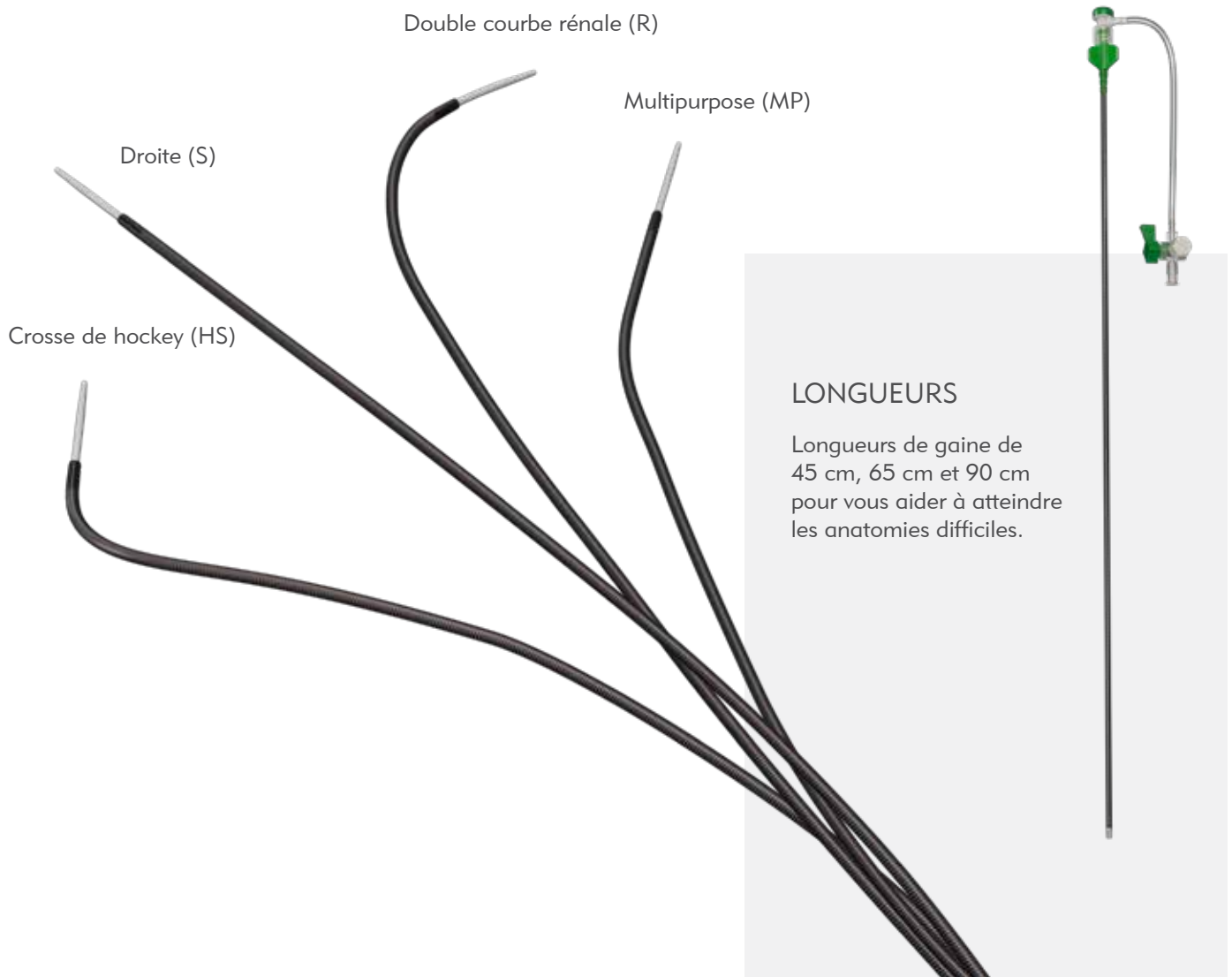

COMMENT LIRE LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE PRELUDE ROADSTER DE MERIT

PG6F90MPX:	<u>PG</u>	<u>6 F</u>	<u>90</u>	<u>MP</u>	<u>X</u>
	Gaine de guidage Prelude	Taille en French	Longueur (cm)	type de courbure	Corps supplémentaire

INFORMATIONS DE COMMANDE

NUMÉRO DE CATALOGUE	TAILLE	LONGUEUR	FIL-GUIDE RECOMMANDÉ	FORME DE L'EMBOUT	TYPE DE CORPS DE GAINÉ
PG4F45S	4 F	45 cm	0,035" (0,89 mm)	Droit	Régulier
PG4F90S	4 F	90 cm	0,035" (0,89 mm)	Droit	Régulier
PG5F45S	5 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Régulier
PG5F45MP	5 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Régulier
PG5F45R	5 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Double courbe rénale	Régulier
PG5F90S	5 F	90 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Régulier
PG5F90MP	5 F	90 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Régulier
PG6F45S	6 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Régulier
PG6F45HS	6 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Crosse de hockey	Régulier
PG6F45MP	6 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Régulier
PG6F45R	6 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Double courbe rénale	Régulier
PG6F65S	6 F	65 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Régulier
PG6F65MP	6 F	65 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Régulier
PG6F65SX	6 F	65 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Corps supplémentaire
PG6F90MP	6 F	90 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Régulier
PG6F90SX	6 F	90 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Corps supplémentaire
PG6F90MPX	6 F	90 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Corps supplémentaire
PG7F45S	7 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Régulier
PG7F45MP	7 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Régulier
PG7F45SX	7 F	45 cm	0,035" (0,89 mm)	Droit	Corps supplémentaire
PG7F45MPX	7 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Corps supplémentaire
PG7F45RX	7 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Double courbe rénale	Corps supplémentaire
PG7F65SX	7 F	65 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Corps supplémentaire
PG7F90SX	7 F	90 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Corps supplémentaire
PG8F45S	8 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Régulier
PG8F45SX	8 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Corps supplémentaire
PG8F45MPX	8 F	45 cm	0,038" (0,97 mm)	Multipurpose	Corps supplémentaire
PG8F65SX	8 F	65 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Corps supplémentaire
PG8F90SX	8 F	90 cm	0,038" (0,97 mm)	Droit	Corps supplémentaire

Conditionné 1 unité par boîte. | Toutes les gaines de guidage Prelude Roadster sont exemptes de latex.

ASSOCIEZ PLUSIEURS PRODUITS MERIT. CRÉEZ DE NOUVELLES SOLUTIONS PROCÉDURALES.

Choisissez parmi une sélection de produits Merit que vous pouvez utiliser avec le Prelude Roadster. Vous pouvez ainsi créer les solutions de procédure complètes dont vous avez besoin.

ANGIOGRAPHIE
SplashWire®
Fil-guide hydrophile



ASPECT DIAGNOSTIQUE
InQwire® Amplatz
Fil-guide



EMBOLIE
EmboCube™
Gélatine d'embolisation



INFLATION
basixTOUCH™
seringue d'inflation



Avant utilisation, se reporter au mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, avertissements, précautions et consignes d'utilisation.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095,
Numéro de téléphone principal :
+1.801.253.1600
Service clients : +1.801.208.4300

Merit Medical Europe, Middle
East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733