




Gamme SafeGuard[®]

Dispositifs de pression assistée

Une pression réelle, un confort réel, des résultats réels.

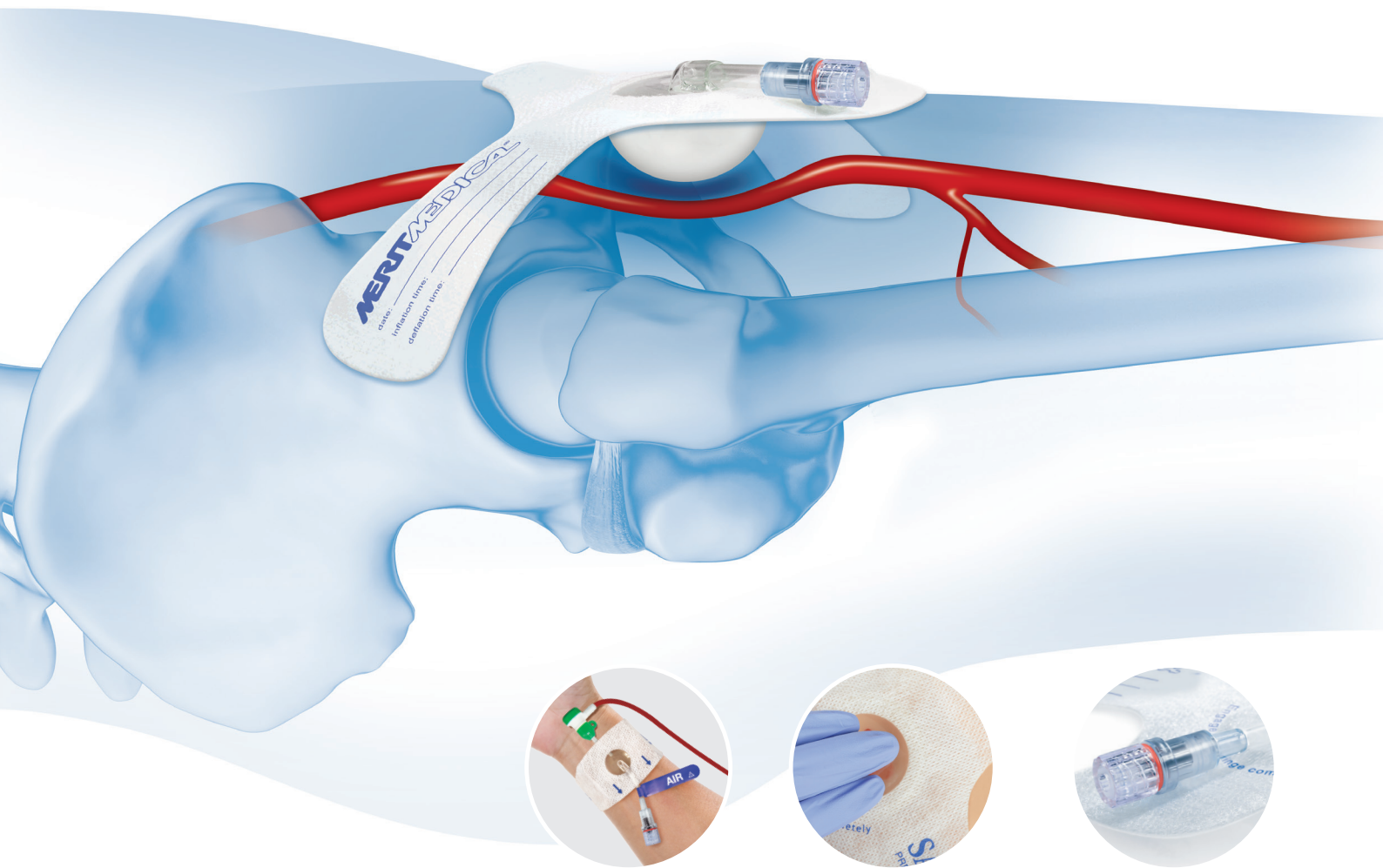

Hémostase fémorale
et radiale



Réduit le temps
de compression active¹



Raccordement spécialisé
pratique et sécurisé

SafeGuard®

Dispositifs de pression assistée

COMPRESSION MANUELLE ASSISTÉE FACILE

Pratiquez et maintenez l'hémostase grâce à SafeGuard. SafeGuard simplifie la gestion pré- et post-hémostase du point de ponction. Il diminue les besoins en personnel soignant, maximise les ressources utiles et améliore le confort du patient. L'essai clinique sur la technique d'assistance manuelle (MAT) de SafeGuard prouve que SafeGuard 24 cm permet de réduire de manière sûre et efficace le temps de compression active de l'artère fémorale suite à un diagnostic et une intervention, avec un temps de coagulation activé (ACT) de 140 secondes ou moins à l'aide d'une gaine jusqu'à 6 F.¹

Dispositif de
pression assistée
24 cm



Dispositif de
pression assistée
12 cm



PRESSION RÉELLE

- Safeguard permet une compression active réglable et un ajustement immédiat de la pression
- Maintient une pression stable sur le site pendant le rétablissement du patient, ainsi que pendant son positionnement et son transport
- Permet de contrôler la gestion du site pour les patients non compliant
- Facilite l'évaluation du site sans retirer le dispositif grâce à la fenêtre transparente

CONFORT RÉEL

- Safeguard est confortable pour le patient
- Maintient une pression stable sur le site pendant l'obtention d'une hémostase par compression manuelle
- Lors de l'essai clinique sur la MAT de Safeguard, 87 % des patients ayant subi une procédure de cathétérisme par le passé ont indiqué que l'utilisation de Safeguard avec MAT était « beaucoup plus confortable » que les procédures précédentes¹
- Safeguard adhère aux patients une fois gonflé, indépendamment de leur anatomie

RACCORDEMENT SPÉCIALISÉ

- Conçue pour privilégier la sécurité, la seringue fonctionne uniquement avec un dispositif de raccordement spécialisé.



Raccordement spécialisé



Seringue de raccordement spécialisé de 40 ml



Réduit le temps de compression active

RÉSULTATS RÉELS¹

Réduit le temps de compression active

Safeguard 24 cm	Diagnostic Minutes	Intervention Minutes
Temps de compression active (dispositif + compression manuelle)	5	10
Temps de compression passive (dispositif seul)	120	240
Temps de compression total	125	250

Faible taux de complications

Safeguard présente un taux de complications majeures plus faible par rapport à la compression manuelle

Taux de complications majeures total (résultats d'une étude menée auprès de 101 patients)

Patients Safeguard	1,0 %
Compression manuelle	2,4 %

SafeGuard®

Dispositifs de pression assistée

Dispositif de pression assistée 24 cm



Dispositif de pression assistée 12 cm

Spécifications		Safeguard 12 cm	Safeguard 24 cm	Safeguard Radial
Longueur		12 cm	24 cm	26 cm
Largeur		7,5 cm	12,8 cm	4,1 cm
Hauteur de ballonnet		1,3 cm à 4 ml	2,5 cm à 30 ml	1,3 cm à 4 ml
Volume de gonflage max.		7 ml	40 ml	7 ml
Force présentée par le ballonnet à des volumes d'air spécifiques*	3 ml	1,33 lb (0,60 kg)	-	1,33 lb (0,60 kg)
	5 ml	3,22 lb (1,46 kg)	-	3,22 lb (1,46 kg)
	7 ml	6,32 lb (2,87 kg)	-	6,32 lb (2,87 kg)
	20 ml	-	4,54 lb (2,06 kg)	-
	30 ml	-	12,16 lb (5,52 kg)	-
	40 ml	-	20,53 lb (9,31 kg)	-

*Ces mesures ayant été prises sur une plaque en acier, l'expérience sur un humain peut varier en fonction de la tonicité des muscles et de la peau qui peut influencer la force exercée.

Référence	Taille/Description	Unité/Boîte
Emballages combinés		
SG2440AC	24 cm, 40 ml : Raccordement spécialisé	5
SG127AC	12 cm, 7 ml : Raccordement spécialisé	10
SGR267AC	26 cm (radial), 7 ml : Raccordement spécialisé	10
Seringues Safeguard seules		
SG40AC	Raccordement spécialisé, 40 ml	10
SG7AC	Raccordement spécialisé, 7ml	10



Dispositif de compression radiale

Safeguard®

Dispositif de pression assistée

DDSM 93/42/CEE Classe I

CE 0086 (BSI)

Fabriqué par Merit Medical

Voir instructions d'utilisation

Voir informations de commande

RÉFÉRENCES

1 Données répertoriées.

Avant d'utiliser les dispositifs, lire attentivement les instructions d'utilisation pour connaître les instructions, les contre-indications, les avertissements, les précautions et les indications d'utilisation.



Comprendre. Innover. Délivrer.

Merit Medical France
Centre d'affaires du
Parc des Lumières 46,
avenue des Frères Lumière
78190 Trappes, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe,
Moyen-Orient
et Afrique (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199
AE Maastricht-Airport
Pays-Bas
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Irlande
+353 (0) 91 703 733

Autriche
0800 295 374

Belgique
0800 72 906 (Néerlandais)
0800 73 172 (Français)

Danemark
80 88 00 24

Finlande
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Allemagne
0800 182 0871

Irlande
(République d')
1800 553 163

Italie
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Pays-Bas
0800 022 81 84

Norvège
800 11629

Portugal
308 801 034

Russie
+7 495 221 89 02

Espagne
+34 911238406

Suède
020 792 445

Suisse
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

Royaume-Uni
0800 973 115