

## Fiche Technique

# Tuteurs Mono J Green-Star® Mono et White-Star® Mono

Endoprothèse urétérale

### INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Code CLADIMED :</b>   | G53AA01      |
| <b>Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :</b>  | NA           |
| *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1 |              |
| <b>Classe du DM :</b>  | Ila          |
| <b>Directive de l'UE applicable :</b>  | 93/42/CE     |
| <b>N° Organisme notifié :</b>  | 0124         |
| <b>Première mise sur le marché de l'UE :</b>   | 1997         |
| <b>Fabricant :</b>   | Urotech GmbH |
| <b>Provenance :</b>  | Allemagne    |
| <b>Statut d'Asept InMed :</b>  | Distributeur |

### **Descriptif du dispositif :**

Application spécifique pour permettre un retrait du tuteur rapide, avec une utilisation à moyen terme (Durée maximale conseillée : 6 mois)

#### Green - Star® Mono et White star® Mono:

Matériau souple spécial pour le confort du patient (Green-Star®)

6 orifices de drainage uniquement sur la crosse

Embout ouvert

Repères pour un positionnement précis

Radio-opaque

Fil Guide : Revêtement PTFE

Adaptateur : Pour raccordement au sac de drainage urinaire

**Conditionnement** : par 10 unités

## Fiche Technique

Références Catalogue :


**Green-Star MONO Kit tuteur urétéral simple J**  
**Matériau souple**



| Référence ASI                       | Référence fournisseur | Taille (FR/CH) | Longueur (cm) | Longueur fil guide (cm) | Diamètre fil guide | Embout fil guide | Rigidité fil guide |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Embout ouvert avec fil guide</b> |                       |                |               |                         |                    |                  |                    |
| 221346                              | EG-350671             | 6              | 70            | 175                     | 0,035"             | droit            | standard           |
| 221347                              | EG-350771             | 7              | 70            | 175                     | 0,035"             | droit            | standard           |
| 221348                              | EG-350871             | 8              | 70            | 175                     | 0,038"             | droit            | standard           |

## Fiche Technique

### White-Star MONO Kit tuteur urétéral simple J

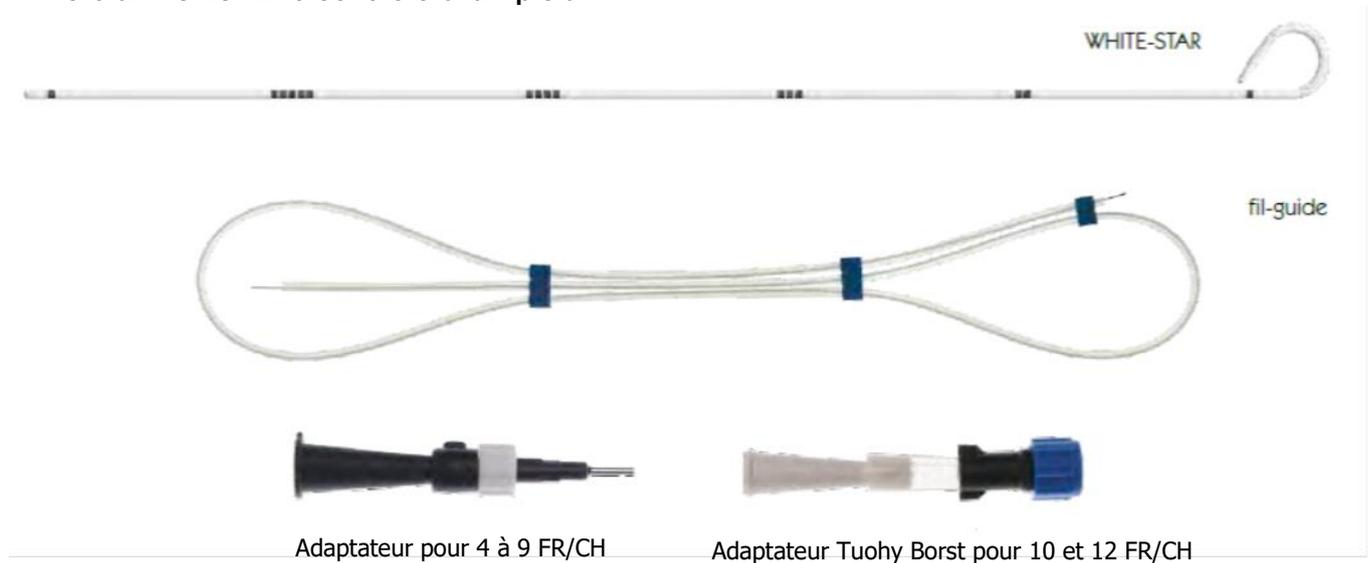

Adaptateur présent pour les réf 221207 et 221208 à la place de l'adaptateur Tuohy Borst

| Référence ASI                       | Référence avec fil guide | Taille (FR/CH) | Longueur (cm) | Longueur du fil guide (cm) | Diamètre du fil guide | Embout du fil guide | Rigidité de fil guide |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Embout ouvert avec fil guide</b> |                          |                |               |                            |                       |                     |                       |
| 221201                              | EN-350471                | 4              | 70            | 125                        | 0,025"                | droit               | standard              |
| 221202                              | EN-350571                | 4,7            | 70            | 175                        | 0,028"                | droit               | standard              |
| 221203                              | EN-350671                | 6              | 70            | 175                        | 0,035"                | droit               | standard              |
| 221204                              | EN-350771                | 7              | 70            | 175                        | 0,035"                | droit               | standard              |
| 221205                              | EN-350871                | 8              | 70            | 175                        | 0,038"                | droit               | standard              |
| 221206                              | EN-350971                | 9              | 70            | 175                        | 0,045"                | droit               | standard              |
| 221207                              | EN-351071                | 10             | 70            | 175                        | 0,045"                | droit               | standard              |
| 221208                              | EN-351271                | 12             | 70            | 175                        | 0,045"                | droit               | standard              |

### Composition du dispositif et accessoires : Principaux composants et matériaux :

Élément : Tuteur White Star  
Élément : Tuteur Green Star  
Élément : Adaptateur

Matériau : Tecoflex 93A/30 Ba 902  
Matériau : Tecoflex EG-85-A-B40 vert  
Matériau : Acier medical/HDPE

## Fiche Technique

Elément : Fil guide

Matériau : Acier medical (inoxydable) avec un revêtement en PTFE

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient, précisions complémentaires :**

**Latex :** Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B :** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Urologie

Endoscopie

**Indications :**

Cystoscopie

Dilatation urétérale

Drainage haut appareil urinaire

Drainage urétéral

**PROCEDE DE STERILISATION :** Oxyde éthylène

**CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

**Précautions particulières :**

Vérifier l'intégrité de l'emballage.

**Durée de validité du produit :**

5 ans.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

**Mode d'emploi :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**PIECES JOINTES :**

Notice d'utilisation.

**CONTACT :**

SERVICE QUALITE – [qualite@aseptinmed.fr](mailto:qualite@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01